

Ekspert za skidanje viška kilograma

Uputstvo (IB-8108C)



Dragi kupci hvala vam što ste izabrali naš proizvod. Za vašu sigurnost i najbolju primjenu molimo vas da pročitate uputstvo prije upotrebe. Sačuvajte uputstvo zbog vaše sigurnosti.

Funkcije proizvoda

Ovaj aparat je pažljivo razvijen prema ljudskom bioničkom istraživanju koje kombinira funkcije razbijanja masti, otpuštanja masti, limfne drenaže, magnetske terapije tvrde kože upotrebom visoke tehnologije uz pomoć masaže, elektroterapije i terapije pritiska za najbolji efekt.

Mršavljenje

- ⊙ Nisko frekvencijska pulsna struja stimulira mišiće na način da otpuštaju velike količine masnih stanica. Električne stopice koje se stavljaju na kritične točke ubrzavaju metabolizam stanica tkiva.
- ⊙ Ultracrvene zrake imaju direktan učinak na strukturu masti i otpuštaju mnogo toplotne energije koja ubrzava cirkulaciju krvi i limfe te ubrzavaju metabolizam i brzinu biokemijske reakcije te uvelike smanjuju masne stanice. Zračne vrećice se napuhuju i ispuhuju redovno sa kontinuiranom promjenom zračnog pritiska, koji skida, razdvaja i uništava masne stanice.

Uljepšavanje tijela i kože


- ⊙ Slabom bioničnom električnom energijom stimuliraju se završetci živaca u epidermi, labava koža se razabire i postaje gipka.
Opuštanje i poboljšavanje imuniteta
- ⊙ Cirkulacija krvi će se ubrzati i mišići će se aktivirati nakon što mikro elektricitet djeluje na tijelo.
- ⊙ Toplotna energija generirana infracrvenim zrakama smanjiva napetost mišića i opušta ih.

Primjena u medicini

- ☉ Stimulira apsorpciju lijekova i poboljšava efekt liječenja.

Druge funkcije

- ☉ Poboljšava liječenje, smanjiva upale, smiruje i pomaže kod nesanice.

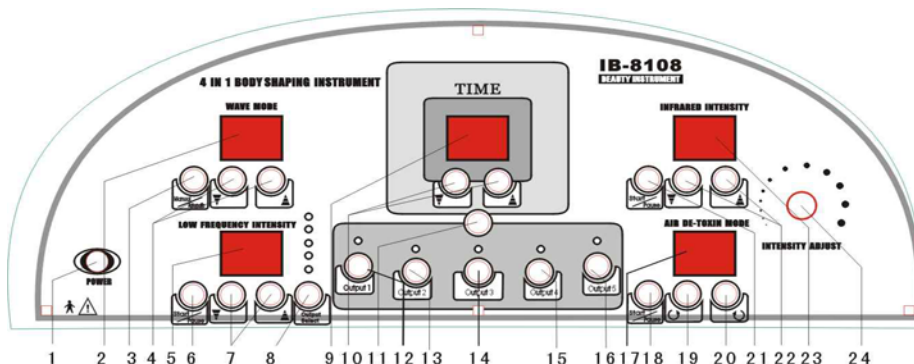

1. Energija
2. Zaslon oblika vala
3. Manualno/automatski prekidač
4. Prekidač za oblik vala
5. Zaslon elektro stimulacijske jačine
6. Elektro stimulacija start/stop
7. Podešavanje jačine elektro stimulacije
8. Prekidač za način elektro stimulacije (5 izlaza)
9. Zaslon radnog vremena
10. Podešavanje radnog vremena
11. Izlaz start/ stop
12. Izlaz prekidača za lijevu ruku
13. Izlaz prekidača za desnu ruku
14. Izlaz prekidača za struk
15. Izlaz prekidača za lijevu nogu
16. Izlaz prekidača za desnu nogu
17. Način zračnog pritiska /zaslon frekvencije

18. Zračni pritisak start/stop
19. Biranje zračnog pritiska
20. Prekidač Frekvencije zračnog pritiska
21. Infracrveno zagrijavanje start/stop
22. Štimanje jačine infracrvenog zagrijavanja
23. zaslon infracrvenog zagrijavanja
24. Prekidač za jačinu zračnog pritiska

Napomena: Kada koristite zračni pritisak stisnite bilo koje dugme



, zatim će se lijeva i desna ruka napuhati u isto vrijeme. Pritisnite



, lijevo i desno stopalo će se napuhati istovremeno. Stisnite



lijeva i desna noga će se napuhati istovremeno.



(lijevo) izlaz elektro stimulacije




(desno) izlaz infracrvenog zagrijavanja

→)(<	→)(<	→)(<	→)(<	→)(<
noga 5	struk 6	struk 7	ruka 8	ruka 9

→)(<	→)(<	→)(<	→)(<	→)(<
stopalo 0	stopalo 1	noga 2	noga 3	noga 4

Izlaz zračnog pritiska detoksikacije:

izlaz rezervnih dijelova za stopalo	stopalo 0	stopalo 1
izlaz rezervnih dijelova za noge	noga 2 noga 3	noga 4 noga 5
izlaz rezervnih dijelova za struk	struk 6	struk 7
izlaz rezervnih dijelova za ruke	ruka 8	ruka 9

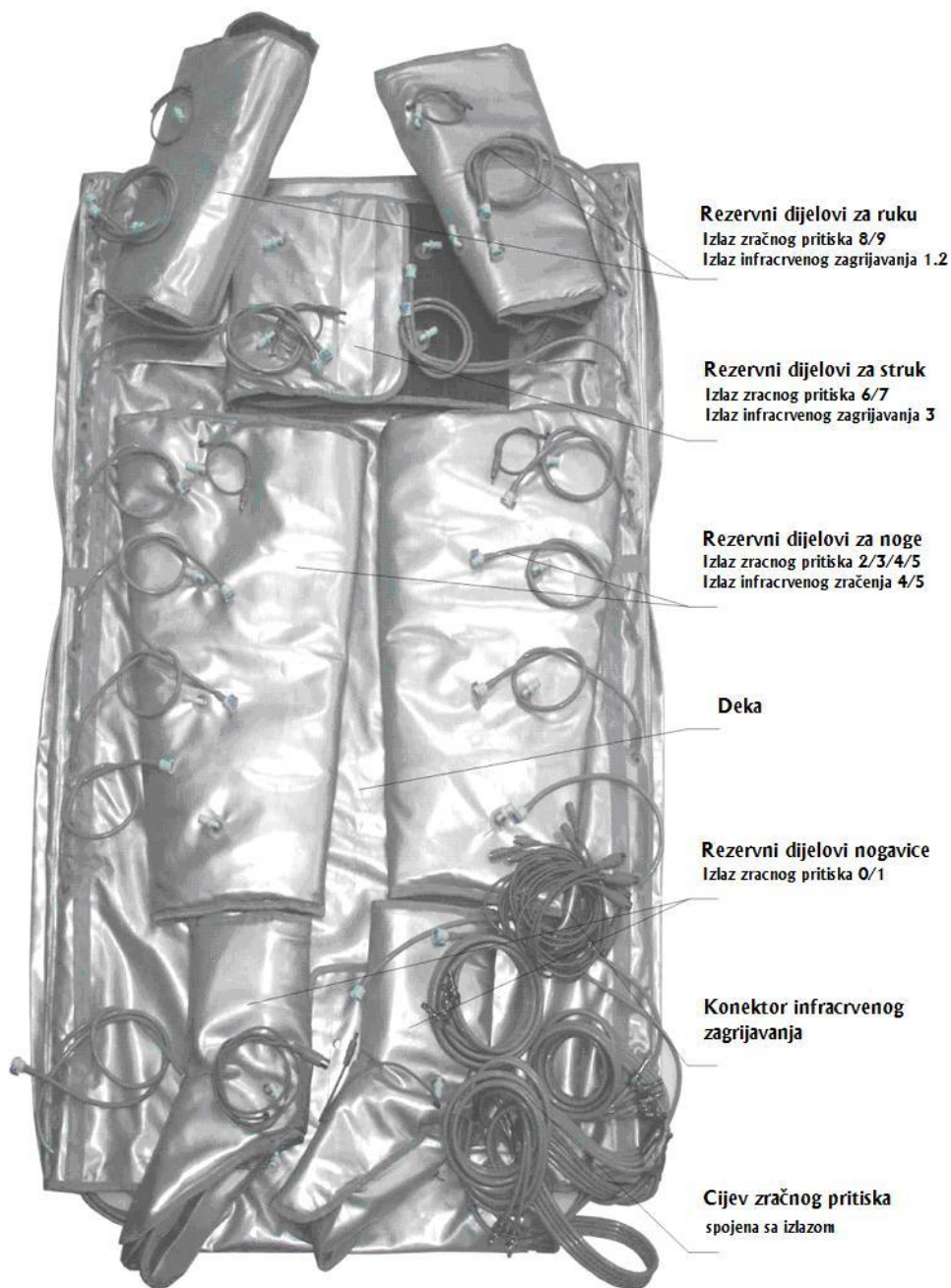

Rezervni dijelovi za ruku
Izlaz zračnog pritiska 8/9
Izlaz infracrvenog zagrijavanja 1.2

Rezervni dijelovi za struk
Izlaz zračnog pritiska 6/7
Izlaz infracrvenog zagrijavanja 3

Rezervni dijelovi za noge
Izlaz zračnog pritiska 2/3/4/5
Izlaz infracrvenog zračenja 4/5

Deka

Rezervni dijelovi nogavice
Izlaz zračnog pritiska 0/1

**Konektor infracrvenog
zagrijavanja**

**Cijev zračnog pritiska
spojena sa izlazom**




Molimo Vas da spojite cijev sa ispravnim brojem.

Dijagram spajanja zračnog pritiska



Spojite ovdje

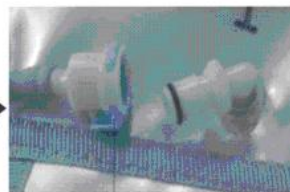


Izvucite konektor van pritiskajući plavu točku prikazanu na slici


Dijagram spajanja elektro stimulacijskih papučica



Elektro stimulacijska žica (koja se spaja sa izlazom)


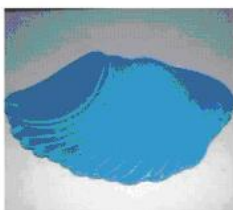


Elektro stimulacijska papučica (koja se stavlja na kožu)

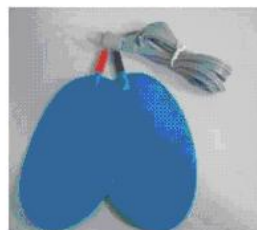

Elektro stimulacijska žica papučice

Dijagram spajanja infracrvenog zagrijavanja

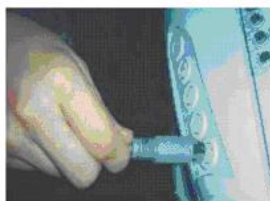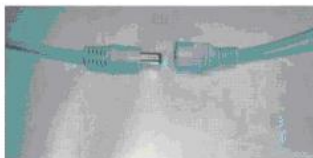

Dijagram spajanja



Električni izlaz

Osigurač

Strujni prekidač

Način upotrebe

1. Provjerite i spojite strujni kabel.
2. Uključite dovod energije, aparat će početi sa radom.
3. Spojite priključne točke na deku i elektrodne papučice na ispravan način. Kako bi bili sigurni, zaslon bi trebao pokazivati «0».
4. Dva načina na koji se stavlja deka za mršavljenje i elektrodne papučice:
 - i. Stavite elektrodne papučice na dijelove tijela s kojim niste zadovoljni, stavite deku za mršavljenje oko struka, ruku i nogu.
 - ii. Molimo stavite zaštitnu foliju te zatim stavite deku za mršavljenje. Za 30 minuta skinite zaštitnu foliju i stavite elektrodne papučice na dijelove tijela.
5. Stisnite POWER dugme na upravljačkoj ploči.
6. Namjestite vrijeme: Prema radnom vremenu podesite vrijeme na aparatu koristeći tipku 10. Minimalno vrijeme upotrebe je 1 minuta a maksimalna 60 minuta. Uobičajeno, primjereno vrijeme je između 30 i 60 minuta.
7. Infracrveno podešavanje:

Stisnite tipku 20 i 21 da podesite infracrveni intenzitet. Postoji 8 nivoa. Prema željama klijenata stisnite “▼” i “▲” kako bi odabrali odgovarajući intenzitet.

Napomena: S obzirom da je priroda kože specifična za svaku pojedinačnu osobu, molimo Vas da ne odabirete visoki intenzitet. Kako bi izbjegli opekotine, molimo Vas da se umotate u vlažan ručnik prije nego stavite deku za mršavljenje. Za vrijeme rada aparata, mala crvena točkica svijetli na desnoj strani LCD-a
9. Podešavanje načina detoksikacije: Postoje 3 načina zračnog pritiska:
 - 1) Zračni pritisak od ekstremiteta prema centru;

- 2) Zračni pritisak od centra do ekstremiteta ;
- 3) Zračni pritisak započinje zajedno. Za svaki način postoji 5 odabira vremena tretiranja. Stisnite Start/Pauzu, kako bi započeli sa radom

10. Elektro Stimulacija

- (1) Odaberite izlaz: Kako bi odabrali izlaz, stisnite Start/Pauzu od 12-16. Ovo je način da odaberete izlaz sa jednim ili više koje želite. Ako je potrebno da radi 5 izlaza u isto vrijeme, pritisnite tipku 11.
 - (2) Podešavanje niske frekvencije: Stisnite tipku 7 kako bi podesili intenzitet niske frekvencije. Postoji 8 nivoa. Stisnite tipku 8 kako bi odabrali izlaz. Možete odabrati jedan izlaz za jedno vrijeme. Stisnite Start/Pauzu tipku kako bi započeli sa radom. Podesite intenzitet pritišćući tipke “▼” i “▲”.
 - (3) Odabir načina vala: Stisnite Start/Pauzu, aparat će početi ili stati sa radom. Stisnite Manual/ Automatic za odabir načina prema klijentovoj želji. U automatskom stanju crvena lampica će treptati. U suprotnom, ukoliko je manualno, imate 5 načina koje možete odabrati.
- 1> Program jedan: Efekt niske frekvencije koji djeluje na masne stanice da luče masnoću i na taj način postižu efekt gubljenja težine. Može se odabrati za svaki dio tijela.
 - 2> Program dva: Pokreti za duboko gubljenje težine. Uklanja duboke slojeve masnih naslaga. Primjereni za duboke slojeve masnih naslaga.
 - 3> Program tri: Vježba mišića kako bi izgubili težinu. Primjeren je za povezane masnoće ima odličan efekt učvršćivanja.
 - 4> Program četiri: Uzastopni val koji poboljšava cirkulaciju limfe i

reducira masnoći iz masnih stanica. Primjeren je za blokiranje limfne cirkulacije sa vidljivim efektima detoksikacije.

5> Program pet: Impulzni val koji opušta mišiće i pospješuje pokretljivost masti.

Upozorenje

Sljedećim osobama je zabranjena upotreba tretmana ovim aparatom.

1. Osobe sa hemofilijom.
2. Osobe koje nose pacemaker.
3. Osobe sa srčanim bolestima.
4. Osobe koje imaju alergije ili malignosti.
5. Osobe sa visokom temperaturom.
6. Trudnice.

Proces tretmana:

1. Istuširajte se.
2. Izmjerite težinu i zabilježite je.
3. Masirajte 15-20 minuta.

(Efekt će biti bolji ukoliko budete koristili proizvode za razgradnju masti).

OSNOVNE NATUKNICE ZA MASAŽU



1. Pritisnite površinu kože



2. Masirajte oko koljena



3. Duboko pritisnite




4. Metoda uvrtnja



5. Metoda lupkanja



6. Metoda sjeckanja

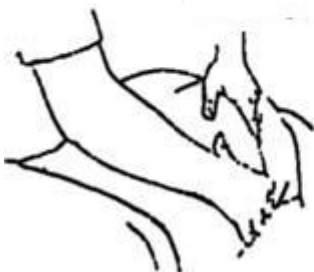

7. Metoda uvrtnja sa dvije ruke



8. Metoda povlačenja od centra do bokova i
stomaka



9. Stisak nazad



4. Masiranje zračnim pritiskom unutar 15—30 minuta.

(1) Omotajte klijenta sa zaštitnom folijom na dijelovima koje želite tretirati. Klijent treba obući deku za mršavljenje i leći na krevet.

(2) Pokrenite aparat pritiskujući dugme Power.  Pogledajte na dijagram ploče 1.

(3) Suspendirajte izlaz elektro stimulacije i infracrvenog zračenja. Pogledajte na zaslon dijagram 6,21.

(4) Stisnite izlaz dugmeta start/stop.  Pogledajte na zaslon dijagram 11.

(5) Naštimajte način zračnog pritiska i vrijeme  koje treba biti namješteno prema izdržljivosti klijenta. Pogledajte na zaslon dijagram 17,18, 19,20,24

5. Ultracrveno zagrijavanje 20—30 minuta.

(1) Molimo vas da umotate klijenta mokrim ručnikom prije tretmana. Zatim klijent treba navući deku za mršavljenje i leći na krevet.

(2) Pokrenite aparat sa pritiskom na dugme POWER  Pogledajte na zaslon dijagram 1

(3) Suspendirajte izlaz elektrostimulacije i zračnog pritiska. Pogledajte na ploči dijagram 6, 18

(4) Stisnite izlaz dugmeta start/stop.  Pogledajte na ploči dijagram 11.

(5) Namjestite intenzitet grijanja na 8,  Kada temperatura dosegne visok nivo namjestite intenzitet na 5/6 kako bi zadržali temperaturu. Pogledajte na ploči dijagram 21, 22, 23

6. Elektrostimulacija unutar 10 min

(1) Pokrenite aparat stiskanjem POWER dugmeta  Pogledajte na ploči dijagram 1.

(2) Suspendirajte izlaz zraka i infracrvenog zračenja. Pogledajte na ploči dijagram 18, 21

(3) Stisnite izlaz dugmeta start/stop.  Pogledajte na ploči dijagram 11.

(4) Izaberite izlaz sa dugmetom  koje želite, zatim namjestite intenzitet sa dugmetom  Pogledajte na ploči dijagram 7

(5) Možete odabrati manual ili auto način podešavanja. Kada crveno svjetlo zasvijetli to je manualno stanje u suprotnom je auto stanje. Postoji 5 načina

manualnog stanja.  Pogledajte na ploči dijagram 2, 3, 4

(6) Pozicija elektrodnih papučica kao na dole navedenim slikama



1> Slika 1: Za vrat i ramena

Funkcija: Poboljšava cirkulaciju krvi ramena i dijela vrata; gubi se težina na tim dijelovima i opuštaju se dijelovi koji se tretiraju.

Slika 1

2> Slika 2: Za ramena i ruke

Funkcija: Poboljšava cirkulaciju krvi u rukama i ramenima i na taj način se gubi težina sa tih dijelova.



Slika 2

3> Slika 3: Za stomak

Funkcija: Poboljšava cirkulaciju krvi na stomaku i na taj način se gubi težina sa tog dijela.



Slika 3



4> Slika 4: Za butine

Slika 4 Funkcija: Kontraktira mišiće butina i na taj način se gubi težina sa tog dijela.

7 Možete odabrati tretman Zračni pritisak/ Ultracrveno zagrijavanje/

Elektro stimulacija.

8. Istuširajte se ponovo nakon tretmana.

9. Kompletan tretman se preporučuje unutar 90 minuta.

Druge preporuke za zračni pritisak

1. Skidanje kilograma sa nogu

(i) Stavite nogavice deke na obje noge.

(ii) Stisnite  <pogledajte na ploči dijagram 15

(iii) Podesite zračni pritisak i frekvenciju kao  (Pogledajte na ploči dijagram 17,18,19,20)

2. Opuštanje cijelog tijela

(1) Stavite deku za mršavljenje

(2) Stisnite tipke 

(3) Namjestite način zračnog pritiska i vremena kao  (Pogledajte na ploči dijagram 17,18,19,20)

3. Zračni pritisak detoksikacija

(1) Stavite deku za mršavljenje



(2) Stisnite tipke

(3) Podesite zračni pritisak i frekvenciju kao  Pogledajte na ploči dijagram 15, 16, 17,18

Napomena: Za vrijeme tretmana ukoliko klijent osjeti prejak intenzitet namjestite dugme In the treatment, if the client feels the intensity too strong,



Pogledajte na ploči dijagram 24

Upozorenja

1. Masirajte tijelo sa proizvodima za učvršćivanje tijela (gel ili ulje) i nanosite na elektrodne papučice za bolji efekt. Intenzitet se podešava prema željama klijenata. Temperatura se treba podešavati postepeno od niže prema više. Ukoliko dođe do osjećaja boli provjerite da li su elektrodne papučice u punom kontaktu sa kožom.
2. Za infracrvenu funkciju treba se podesiti na 8 nivo prvo, kada klijent osjeti toplotu smanjite nivo na 5 do 6. Zadržite ovu temperaturu. Zima /Ljeto prekidač koji je smješten na stopici se odabire prema sezoni i temperaturi sobe.
3. Za vrijeme cijelog tretmana kozmetičar treba komunicirati sa

klijentom , provjeravati temperaturu i isparavanje i prema tome prilagođavati funkcije.

4. Za vrijeme tretmana ukoliko želite prekinuti sa nekom od funkcija prvo stisnite PAUSE da bi ste to uradili.
5. Molimo vas da sterilizirate deku za mršavljenje i elektrodne papučice sa 50% alkoholom nakon upotrebe.

Specifikacije

Izvor napajanja: AC □ 110V □ 220V □ 230V □ 240V

Dimenzije: Glavni aparat: $103 \times 55 \times 46$ (cm)

Deka: $91 \times 46 \times 12$ (cm)

Težina: Glavni aparat: 29kg.

Deka: 6.6kg

Izlazna energija: 350W

Frekvencija: 50-60Hz

Lista dijelova

Naziv	Mjera	Količina	Napomena
Glavno računalo	Set	1	
Odjeća za mršavljenje	Set	1	
Žica papučica	Traka	5	
Elastični kolut	Set	1	
Deka	Set	1	
Elektrodna papučica	kom	10	
Električni kabel	traka	1	
Osigurač	kom	2	
Uputstvo	kom	1	

Greške i otklanjanje

Greška	Otklanjanje
Aparat se ne želi pokrenuti	provjerite da li ste dobro spojili na struju
	Provjerite da li ste uključili aparat
elektro jastučić nema izlaza energije	Provjerite da li je elektro jastučić ispravno spojen sa aparatom
	Provjerite da li je elektro stimul. jastučić ispravno spojen sa žicom
Odjeća za mršavljenje ne grije	provjerite da li je odjeća za mršavljenje dobro spojena na aparat
Odjeća za mršavljenje se ne napuhuje	Provjerite da li je plastični konektor dobro spojen sa aparatom
Prilikom rada aparat se pregrijava	Previše rada, izgasite aparat i pustite da se ohladi
	Provjerite ispravnost kabela

Važno sigurnosno upozorenje

1. Molimo vas da ne rastavljate aparat i ne izvodite neke druge radnje koje nisu indicirane u našem uputstvu. Sve popravke trebaju izvršiti stručnjaci.
2. Nemojte sastavljati opremu ili rukovati s njom dok ste u blizini vode ili su vam ruke vlažne. Imajte na umu da ne smijete namakati aparat u tekućinu.
3. Izvadite kabel iz utikača kada se nađete u sljedećim situacijama.
Nazovite servis:
 - Oprema je dotaknula tekućinu.
 - Oprema ispušta čudan i neugodan miris, proizvodi čudan zvuk i jaku buku.
 - Kabel je slomljen
 - Oprema je pala i polomila se
4. Ne stavljate ništa na kabel i sklonite sa mjesta gdje bi netko mogao stati na njega.
5. Izvucite kabel nakon što ste završili sa radom.
6. Ne stavljajte ništa u utikače opreme jer biste mogli prouzrokovati požar ili elektricitet. Ako vam nešto uđe u opremu ne vadite sami nego kontaktirajte dobavljača.
7. Ne stavljate opremu na bilo što, što je nestabilno kako se ne bi izvrnula i oštetila.
8. Naša firma zadržava pravo da modificira ovo uputstvo bez obavještanja! Zadržite upute zbog gore navedenih razloga.